

X. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Produkt się nie włącza.	Bateria jest rozładowana.	Naładuj produkt.
	Produkt jest ładowany.	Produkt należy stosować po pełnym naładowaniu.
Bateria się nie ładuje.	Wtyczka nie jest podłączona prawidłowo.	Ponownie podłączyć wtyczkę.

XI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem i konserwacją, należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od zasilania. Do czyszczenia, zaleca się używanie wilgotnej chusteczki. Jeśli urządzenie jest szczególnie zabrudzone, można użyć odrobiny medycznego alkoholu (stężenie 75%) do dezynfekcji.
2. Podczas konserwacji, należy przetrzeć urządzenie miękką szmatką z neutralnym detergentem. Nie używać żrących detergentów. Nie moczyć ani nie płukać w wodzie.
3. Zapobiegaj przedostawaniu się wody lub innych płynów do produktu podczas czyszczenia, aby zapobiec zwarciu i porażeniu prądem podczas użytkowania.

XII. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych i rozpryskiwania się wody. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i ładować go raz na dwa miesiące.

Bateria bańki jest specjalnym akumulatorem i nie może być używana w innych produktach.

1. Chronić urządzeniem przed ogniem.
2. Nie wolno demontować i przekształcać urządzenia.
3. Nie należy bezpośrednio łączyć dodatniej i ujemnej elektrody baterii z metalem.
4. Nie należy przechowywać produktu z biżuterią itp.
5. Nie ładować, nie używać i nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze np. w pobliżu pieca, kuchenki lub pod palącym słońcem.

Powyższe sytuacje mogą spowodować przegrzanie, pożar lub awarię urządzenia.

XIII. GWARANCJA


Jeżeli urządzenie zepsuje się w ciągu 1 roku od daty zakupu, Hi5 naprawi, wymieni produkt lub dostarczy części zamienne, bez dodatkowych opłat. Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu sprzętu.
2. Napraw poza autoryzowanym serwisem.
3. Niewłaściwego użytkowania sprzętu.
4. Uszkodzeń przekraczających koszt urządzenia.
5. Uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe przechowywanie sprzętu u Klienta (w szkodliwych warunkach).
6. W sytuacji braku dowodu zakupu.



HealthTech

HI5 uCute ELEKTRYCZNA BAŃKA CHIŃSKA

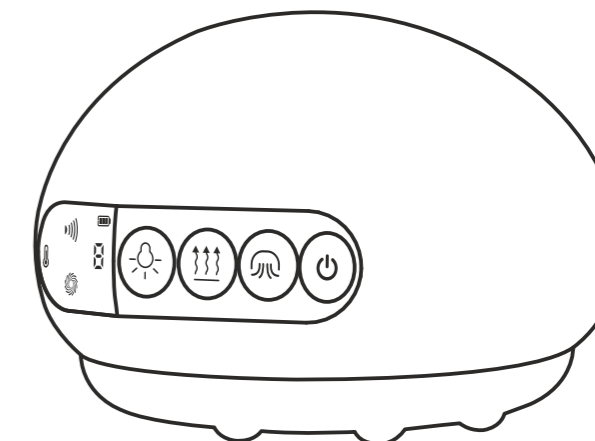

HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

I. OSTRZEŻENIA

1. Jeśli kabel ładujący lub wtyczka są uszkodzone, nie demontuj ich samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
2. Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
3. Odłącz zasilanie, gdy zamierzasz wyczyścić produkt.
4. Nie używaj części i akcesoriów, które nie są zalecane.
5. Należy zaprzestać stosowania produktu w przypadku odczuwania dyskomfortu.
6. Nie wylewaj wody ani innych płynów na urządzenie lub jego wnętrze.
7. Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas użytkowania produktu.
8. Przed użyciem produktu należy włożyć do filtra bawełnę filtracyjną. Filtr zapobiega przedostaniu się olejków eterycznych do wnętrza produktu.
9. Umyj bawełnę filtracyjną w celu ponownego użycia.
10. Pacjenci z zylakami nie powinni stosować produktu.
11. Nie należy stosować produktu w czasie menstruacji lub ciąży.
12. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku hipoglikemii lub nadciśnienia.
13. Nigdy nie stosuj produktu po posiłku. Zalecana przerwa około 30-45 minut.
14. Przed wzięciem prysznicza odpocznij około 3 godzin od masażu.
15. Masować tylko w jednym kierunku.
16. Nie należy stosować produktu codziennie.
17. Nie należy używać produktu, gdy ciało jest mokre.
18. Produkt nie może być traktowany jako lek lub urządzenie medyczne.
19. Osoby, których skóra jest wrażliwa, przed użyciem olejku eterycznego powinny wykonać test, rozmazując olejek na nadgarstku lub grzbiecie ucha.

II. UŻYTKOWANIE

1. Nie używać produktu w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
 2. Zabrania się używania produktu podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.
 3. Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu i żrących zapachów.
- Należy zaprzestać stosowania produktu w przypadku odczuwania dyskomfortu.


Zalecenia przed masażem bańką elektryczną

1. Nie stosować urządzenia na klatce piersiowej, twarzy i w okolicy szyi.
2. Nie masować bańką ciągle tego samego miejsca.

Zalecenia po masażu bańką elektryczną

1. Masaż bańką elektryczną przyspiesza metabolizm. Po masażu należy wypić dwie szklanki wody, a następnie odpocząć przez ponad godzinę.
 2. Masaż bańką powoduje otwarcie porów ciała, dlatego po masażu unikaj przeciągów i wiatru.
 3. Odpocznij przez co najmniej 3 godziny zanim pójdziesz pod prysznic. Zalecamy ciepły prysznic.
 4. Po masażu bańką należy zrobić przerwę. Zalecana przerwa między sesjami masażu bańką to 5-7 dni.
- UWAGA! Osoby chore i cierpiące na różne dolegliwości, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Wymiana bawełny filtracyjnej:

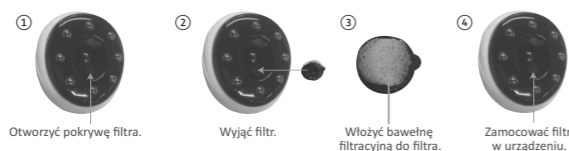

III. OLEJKI ETERYCZNE - SKUTECZNOŚĆ I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skuteczność olejku eterycznego

Łagodzi emocje, oczyszcza umysł, poprawia koncentrację, zwiększa zawartość tlenu w organizmie, odblokowuje pory i poprawia stan skóry.

Instrukcja użycia czystych olejków eterycznych

Czyste olejki eteryczne nie mogą być stosowane bezpośrednio na skórę. Przed zastosowaniem, muszą być rozcieńczone olejem bazowym lub balsamem. Zaleca się zmieszanie ≤5 kropli czystych olejków eterycznych z 10 ml oleju bazowego.

IV. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od światła w temperaturze poniżej 20°C 68°F.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia, kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
3. Jeśli olejek przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody.
4. Nie wachać butelki blisko ust i nie spożywać olejków.
5. Dla osób o szczególnie wrażliwej skórze zaleca się wykonanie przed użyciem testu wrażliwości za uchem lub na nadgarstku.


V. METODY MASAŻU BAŃKĄ ELEKTRYCZNĄ

Po zastosowaniu olejków eterycznych należy:

2. Grzbiet: masować grzbiet od góry do dołu.
3. Podeszwa stopy: masować od pięty do palców.
4. Brzuch: masować od góry do dołu, lub wykonywać ruchy okrężne.
5. Kończyny górne: masować od góry do dołu.
6. Nogi: masaż nóg należy rozpocząć od łydek.

Pamiętaj, aby masować tylko w jednym kierunku, np. z dołu do góry.

VI. BUDOWA BAŃKI

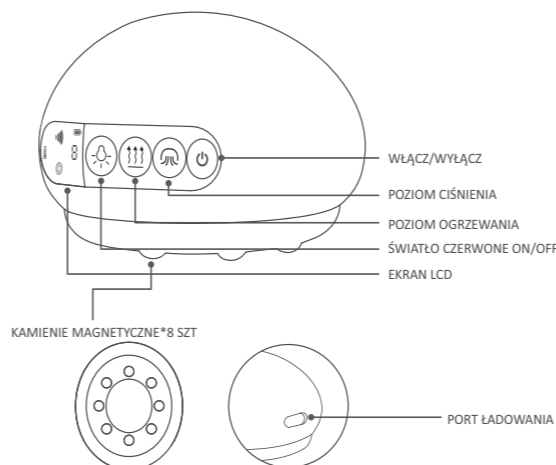

VII. OBSŁUGA

1. Naciśnij długo aby włączyć. Czerwona lampki oznaczają stan gotowości.
2. Naciśnij długo aby wyłączyć produkt.
3. Naciśnij krótko aby przełączyć poziomy (poziom I, 2, 3, 4, 5, 0 - po kolei), ikona ciśnienia będzie migać i emitować odpowiednio długi sygnał dźwiękowy. Naciśnij długo przycisk aby wyłączyć produkt.
4. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę temperatury (poziom I, 2, 3, 0 - po kolei), ikona ogrzewania będzie migać, co zostanie potwierdzone długim sygnałem dźwiękowym. Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie funkcji ogrzewania.
5. Naciśnij krótko aby włączyć lub wyłączyć czerwone światło.
 - a) Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki.
 - b) Tryb ciśnieniowy: poziom I, 2, 3, 4, 5.
 - c) Tryb ogrzewania: poziom I, 2, 3.
6. Niskie ogrzewanie: 38°C±3°C/100.4°F±5.4°F.
7. Średnie ogrzewanie: 41°C±3°C/105.8°F±5.4°F.
8. Wysokie ogrzewanie: 44°C±3°C/111.2°F±5.4°F.
9. Produkt nie działa w trakcie ładowania.

VIII. ŁADOWANIE

1. Produkt jest wyposażony w baterię litową. Gdy wyświetlacz pokazuje niski poziom, należy naładować urządzenie.
2. Aby naładować produkt, należy użyć zasilacza DC5V/1A (nie zawarty w zestawie) lub portu USB komputera.
3. Proszę użyć adaptera DC5V, podłączyć końcówkę USB kabla ładowania do adaptera, a drugi koniec do portu USB-C w produkcie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni status ładowania.
4. Gdy produkt jest ładowany, nie można go używać.

IX. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Hi5 uCute SCRAPING APPARATUS
Model	uCute
Napięcie znamionowe	3.7V
Moc znamionowa	4.4W
Prąd czuwania po wyłączeniu	<20uA
Hałas	<65dB
Niskie ogrzewanie	38°C±3°C/100.4°F±5.4°F
Średnie ogrzewanie	41°C±3°C/105.8°F±5.4°F
Wysokie ogrzewanie	44°C±3°C/111.2°F±5.4°F
Inteligentny czasomierz	10min
Pojemność akumulatora	2200mAh