

Numer instrukcji: 050/2022
Data wydania instrukcji: 25.11.2022

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 887 766 115, info@habys.pl

www.habys.pl

Warunki bezpiecznego użytkowania.

- W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, produkt musi być używany zgodnie z poniższymi zasadami:
 - Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów oraz źródeł ciepła. Chronić otwory wentylacyjne przed kurzem i cząstkami brudu.
 - Nie wykręcać śrub, nie rozkładać urządzenia na części.
 - Nie używać bez przerwy przez dłużej niż godzinę. Należy odczekać 30 min. przed ponownym użyciem.
 - Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.
 - Chronić przed dziećmi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie stosować urządzenia na następujących częściach ciała: narządy płciowe, twarz, oczy, rany pooperacyjne, zainfekowana, zraniona skóra, uszkodzone kości lub stawy.
 - Stosować tylko na czystej, suchej powierzchni ciała, poprzez lekkie uciskanie i przesuwanie po ciele przez około 60 sekund na jednej partii.
 - W przypadku bólu lub innego dyskomfortu, należy natychmiast przerwać używanie.
 - Ładować wyłącznie oryginalny zasilaczem.
 - Zasilacza używać tylko do ładowania urządzenia, nie należy wykorzystywać go do innych celów.
 - Nie używać innych zasilaczy do ładowania urządzenia.
- Nie stosować masażera ani innych urządzeń wibracyjnych bez uzyskania zgody od lekarza w przypadkach: cięża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki oka, stosowanie rozrusznika serca, niedawno przebyta operacja, epilepsja, migrena, przepuklina dysku, kręgoszynek, spondyloza, spondyloliza, niedawna wymiana stawu, wkładka domaciczna, metalowe pręty lub blaszki.
- Osoby słabe i dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas stosowania urządzenia.
- Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają zakazu korzystania z masażera, jednak zalecamy uprzednią konsultację z lekarzem.

Specyfikacja.

Bateria: Lithium-ion 2600mAh
Ładowarka DC: 16,8V / 1A
Silnik: bez szczotkowy
Ilość poziomów prędkości: 30
Zakres poziomów prędkości: 1300 – 3600rpm
Amplituda drgań: 16mm
Wyświetlacz: LCD
Poziom hałasu ≤50dB
Wymiary: 180mm x 255mm x 50mm
Waga netto: 1kg

Rozpakowanie i pierwsze użycie.

- Zawartość opakowania:



- masażer wibracyjny
- 12 wymiennych końcówek do masażera
- ładowarka
- instrukcja obsługi
- futurał

- Rozpakowanie.
Usuń wszystkie komponenty zabezpieczające z pudełka wysyłkowego. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Przed pierwszym użyciem naładuj baterię urządzenia do pełna.

Instrukcja obsługi.

1. Ładowanie.

- Przed ładowaniem upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „OFF”.
- Podczas ładowania baterii, aktualny poziom wyświetlany będzie w dolnej części rękojeści wartościami % oraz symbolem ładującej się baterii.
- Pełne ładowanie zajmuje około 3 godzin, wyświetlacz rękojeści przestanie migać i gdy uzyskana zostanie wartość 100%.
- Poziom aktualnego naładowania baterii będzie widoczny również na wyświetlaczu głównym w przedziałach: 40%, 60%, 80% i 100%.
- Czas działania urządzenia na najwyższym poziomie prędkości wynosi około 8 godzin.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, zacznie migać czerwona dioda. Należy wtedy naładować urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
- Aby zapewnić długą żywotność, należy ładować urządzenie, gdy zacznie migać czerwona dioda.

2. Wymiana głowic masujących.

- Nasadki należy zdejmować gdy urządzenie jest wyłączone, pociągając i lekko przekręcając.
- Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno aż do osadzenia elementu.

3. Włączenie / Wyłączenie.

- Celem uruchomienia urządzenia przesunąć przełącznik zasilania do pozycji „ON”.
- Celem wyłączenia urządzenia przesunąć przełącznik zasilania do pozycji „OFF”.

4. Regulacja prędkości.


- Poziom 1 będzie domyślnie ustawiony po włączeniu urządzenia.
- Każde naciśnięcie przycisku „+” na wyświetlaczu głównym zwiększy prędkość do wyższego poziomu.
- Każde naciśnięcie przycisku „-” na wyświetlaczu głównym zmniejszy prędkość do niższego poziomu.
- Zakresy poziomów regulacji przedstawia tabela na następnej stronie.

POZIOM 1-5	1300-1600 rpm
POZIOM 6-10	1700-2000 rpm
POZIOM 11-15	2100-2400 rpm
POZIOM 16-20	2500-2800 rpm
POZIOM 21-25	2900-3200 rpm
POZIOM 26-30	3300-3600 rpm

Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w 10 minutowy licznik pracy, aby uniknąć uszkodzenia mięśni i powięzi spowodowanych nadmiernym masażem.

5. Wyświetlacz główny i pomocniczy.

- Na wyświetlaczu głównym będą wyświetlane wszelkie informacje użytkowe takie jak: stan naładowania baterii, aktualnie ustawiona prędkość, wskaźnik prawidłowego nacisku podczas pracy.
- Nacisk podczas pracy sygnalizowany będzie diodami: 3 diody zielone jako prawidłowy zakres nacisku podczas pracy, diody czerwone jako za duży nacisk podczas pracy.
- Na wyświetlaczu pomocniczym w dolnej części rękojeści prezentowany będzie aktualny poziom naładowania baterii.

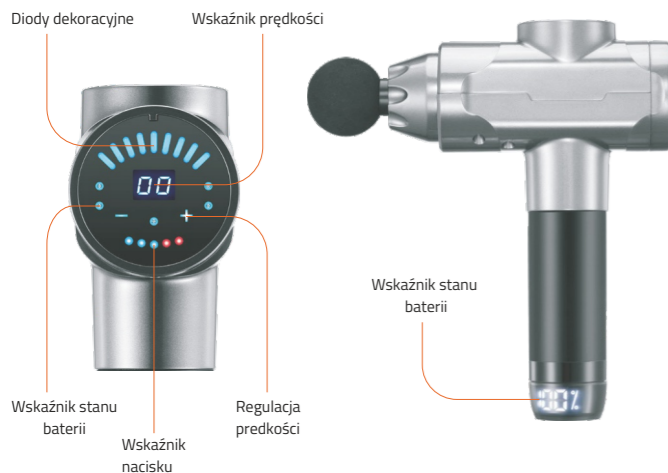

Wymienne głowice.

- Okragła – do masażu mięśni m.in. karku, ramion, pleców, kończyn górnej i dolnej.
- Widełkowa (U-shape) – do masażu m.in. okolic kręgosłupa.
- Płaska – do masażu mięśni m.in. karku, ramion, pleców, kończyn górnej i dolnej, mięśni biodrowych.
- Łopatkowa – do masażu mięśni m.in. dolnej partii pleców.
- Pocisk – do masażu dłoni, mniejsze partie mięśniowe.
- Łukowa – do masażu m.in. mięśni ud i łydek.
- Gyro – do głębokiej penetracji mięśni i punktów spustowych.
- Mashroom – do delikatnego masażu w obrębie stawów.
- Palcowa – do punktowej pracy ze strukturami mięśniowo powięziowymi.
- Grzebieniowa – do masażu mięśni w okolicach kręgow, zaprojektowana tak aby chronić ścięgna i masować wyłącznie mięśnie.
- Płaska końcówka rozgrzewająca – do masażu mięśni m.in. karku, ramion, pleców, kończyn górnej i dolnej, mięśni biodrowych z dodatkową funkcją grzejącą (44 °C, 56 °C lub 61 °C).
- Płaska końcówka z wkładem żelowym – miękka żelowa poduszka do ogólnego masażu z dodatkową funkcją chłodzenia (po wcześniejszym schłodzeniu końcówki w lodówce).



Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie.

Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie używać alkoholu lub środków zawierających alkohol do czyszczenia. Dozwolone jest użycie jedynie małej ilości neutralnego detergentu do czyszczenia urządzenia.

Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno aż do mocnego osadzenia elementu.

Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.

Warunki gwarancji.

- Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - „Producent” oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - „Nabywca” oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta, w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
 - „Dystrybutor” oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie.
 - „Autoryzowany Serwis” oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora,
 - „Sprzęt” oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
- Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie: 1 rok.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, konserwacja Sprzętu, itp.).
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe za przyczyn tkwiących w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekłuć i przetarć, obecności plam lub pierścieni po tustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans).
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
- Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 - stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza Autoryzowanym Serwisem,
 - dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta,
 - używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
- Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.
- Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
- Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Sprzętu.
- Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usunięcia wad lub uszkodzeń konstrukcji Sprzętu powstałych za przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu. Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczynę opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.
- Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia czterech warunków:
 - przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę, a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego,
 - zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
 - dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,
 - oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został zwrócony Nabywcy.
- Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu i sposobu naprawy Sprzętu.
- Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymiany Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozbawieniem go możliwości korzystania ze Sprzętu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewoźowego do chwili jego odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewoźowego.
- Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecona przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
 - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu i dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 - dostarczyć Producentowi protokołu reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i przedsiębiorcą transportowym.
- Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.