

Przechowywanie i konserwacja

1. Nie umieszczaj urządzenia blisko ziemi, ścian i dachów.
2. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, unikać silnego nasłonecznienia i intensywnych zapachów.
3. Produkt został wyposażony w prosty system antywibracyjny, przystosowany dla podróżowania samolotem, koleją i samochodem. Należy unikać deszczu, śniegu, zamoczenia, upadku i mocnych uderzeń.

Konserwacja

1. Trzymać urządzenie z dala od wilgoci i zanieczyszczeń.
2. Wyłączyć pilot podczas czyszczenia.
3. Po użyciu przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
4. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się z serwisem. Nie dokonywać napraw we własnym zakresie.

Dane techniczne

1. Nazwa produktu: Masażer ciała z podgrzewaniem Hi5 Nassa
2. Moc wejściowa: DC 5V \equiv 1A
3. Moc znamionowa: 5W
4. Zasilanie: wbudowana bateria litowa 3.7V/2200mAh
5. Ładowanie: Uniwersalny port smartfonów USB-C

Gwarancja

Jeżeli urządzenie zepsuje się w ciągu 1 roku od daty zakupu, Hi5 naprawi, wymieni produkt lub dostarczy części zamienne, bez dodatkowych opłat.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu sprzętu,
- b) napraw poza autoryzowanym serwisem,
- c) niewłaściwego użytkowania sprzętu,
- d) uszkodzeń przekraczających koszt urządzenia,
- e) uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe przechowywanie sprzętu u Klienta (w szkodliwych warunkach),
- f) w sytuacji braku dowodu zakupu.



Relieve. Recover. Restore

Masażer ciała z podgrzewaniem Hi5 Nassa



HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

Instrukcja



1. Urządzenie posiada cztery tryby masażu, naciśnij przycisk „Zasilanie / Tryb pracy”, aby przełączyć tryb.
2. Podgrzewanie: włączenie lub wyłączenie ogrzewania (bez zmian poziomu).

Cechy urządzenia

Urządzenie jest praktycznym masażerem, przeznaczonym do masażu szyi oraz innych części ciała. Wykorzystuje nacisk, gorący okład, ugniatanie, masaż powięzi, mięśni i punktów akupunkturalnych, doskonale rozluźnia, łagodzi ból i napięcie.


Ładowanie

1. Podczas ładowania wskaźnik poziomu baterii miga.
2. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik poziomu baterii osiąga najwyższy poziom i przestaje migać.
3. Gdy bateria się wyczerpie, wskaźnik będzie migał a urządzenie będzie emitować co dwie minuty sygnał dźwiękowy. Po włączeniu, masażer zasygnalizuje stan gotowości poprzez 3 sygnały dźwiękowe.
4. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3 godzin.

Cechy i funkcje urządzenia

1. Obudowa wykonana z kompozytowego materiału ABS + PC zapewnia odpowiednią wytrzymałość i odporność na uderzenia.
2. Głowica masująca posiada antybakteryjną tkaninę Lycra, co sprawia, że jej powierzchnia jest delikatniejsza i bardziej elastyczna, a masaż staje się jeszcze bardziej komfortowym.
3. Masażer wykonuje sztuczny masaż shiatsu. W zależności od potrzeby, można go dostosowywać według upodobań.
4. Funkcja podgrzewania pomaga rozluźnić i odprężyć ciało.
5. Metody masażu “zgodnie z ruchem wskazówek zegara” i “przeciwnie do ruchu wskazówek zegara” zapewniają różne odczucia.
6. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy będzie działać przez 15 minut.

Zamontuj pasek na rękę przy pierwszym użyciu urządzenia.

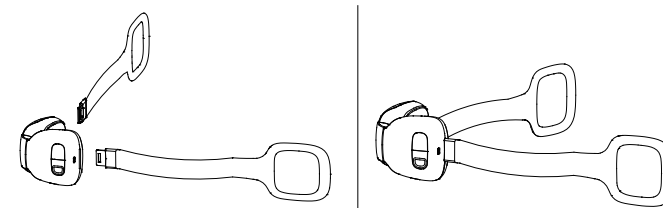

Uwaga

1. Nie używać produktu w gorących i wilgotnych miejscach.
2. Należy założyć produkt przed włączeniem.
3. Zabrania się stosowania u osób, które mają stany zapalne, zatory i inne objawy choroby lub osób, które przeszły operację.
4. Zabrania się stosowania u osób cierpiących na nadciśnienie i choroby psychiczne.
5. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji ciała i nie może zastępować leczenia przez lekarzy.
6. Aby wyczyścić urządzenie, przecierać zdezynfekowanym wacikiem nasączonym naturalnym detergentem. Nie czyścić wodą.