

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KSZTAŁTEK REHABILITACYJNYCH

MODEL:

WAŁ1-WAŁ23, KL1-KL3, KL5-KL22, PW1-PW23, ZES15



I. Budowa i zastosowanie

Kształtki do rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej. Przeznaczone są do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających korygowanie budowy anatomicznej. Kształtki wykorzystywane mogą być w:

- gabinetach lekarskich i odnowy biologicznej
- ośrodkach zdrowia
- w domu u pacjenta

II. Konserwacja i czyszczenie

Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

III. Dezynfekcja


Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem.

IV. Zalecenia

1. Użytkować zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.



CE

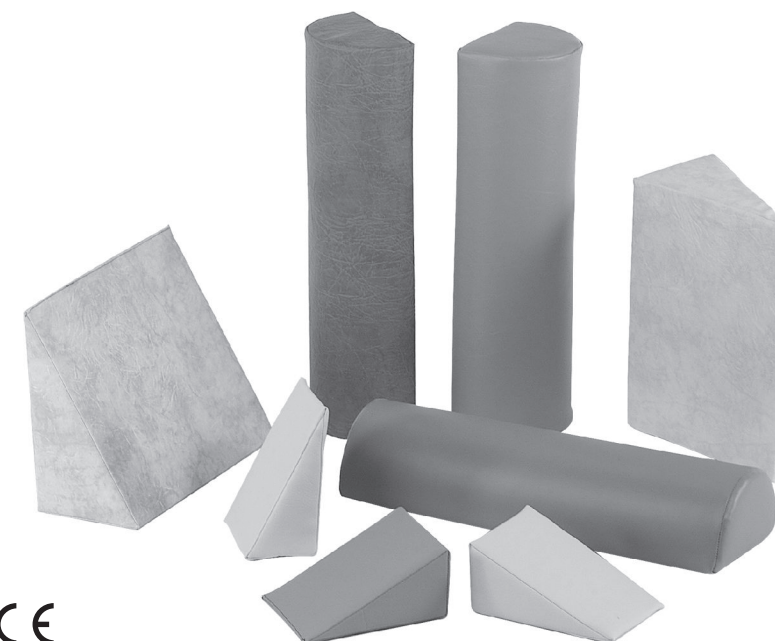

CE