

VII. Konserwacja i czyszczenie

1. **Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące: Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.
2. **Drewno, sklejka.** Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając je do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec może posiadać różnice w układzie słoje, różnice w odcieniach koloru jak i naturalne wstawki typu: smugi, kropki. Nie obniża to jakości wyrobu, a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. Cechy takie nie są podstawą do reklamacji.

VIII. Uwagi eksploatacyjne

1. Stół przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
3. Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
4. Stół może być transportowany w stanie złożonym z zabezpieczonym zamkiem.
5. Zabrania się siadania, klęknięcia i opierania na podgłówniku, półkach i podłokietnikach.
6. Przy składaniu stołu zwrócić uwagę na ułożenie linek. Nie zatrząskiwaj linek w momencie zamykania stołu.
7. Stół powinien być użytkowany i przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
8. Właściwe użytkowanie stołu zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
9. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.
10. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
11. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

IX. Dane techniczne

Stół	Długość	Szerokość	Wysokość regulowana skokowo	Wymiary po złożeniu	Odchylenie leżyska	Waga bez wyposażenia	Dopuszczalne obciążenie
eSpirit	184 cm	64 cm 70 cm	58 - 79 cm 58 - 79 cm	92x64x20 cm 92x70x20 cm		13,0 kg 14,5 kg	230 kg
Aura	184 cm	64 cm	62 - 87 cm	92x64x18 cm		12,5 kg	200 kg
Eden	184 cm	64 cm	62 - 87 cm	92x64x18 cm	0°÷50°	14,5 kg	200 kg
Verona	184 cm	64 cm	60 - 80 cm	92x64x18 cm		11,1 kg	200 kg
Athena	184 cm	64 cm	60 - 80 cm	92x64x18 cm	0°÷50°	13,1 kg	200 kg
Altus	184 cm	71 cm	61,5 - 81,5 cm	92x71x20 cm		14,0 kg	230 kg
Vesta	184 cm	71 cm	61,5 - 81,5 cm	92x71x20 cm	0°÷50°	18,1 kg	230 kg
Luna Light	184 cm	64 cm	61 - 81 cm	92x64x20 cm		10,3 kg	200 kg
Torina	184 cm	71 cm	61 - 81 cm	92x71x18 cm		15,5 kg	200 kg

INSTRUKCJA

użytkowania składanych stołów do masażu


AVENO *life*
massage starts here

eSpirit
Aura | Eden
Verona | Athena
Altus | Vesta
Luna Light
Torina

I. Zastosowanie

Składane stoły rehabilitacyjne umożliwiają fizjoterapeucie prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/upośledzeń. Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu lub badania. Budowa stołów rehabilitacyjnych pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony, dzięki czemu wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/badania.

II. Budowa stołów składanych

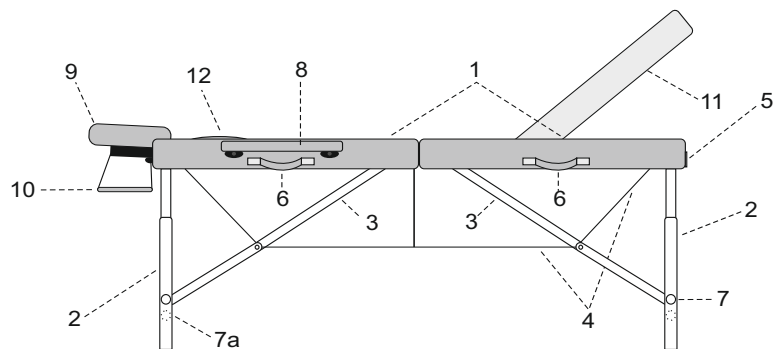

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Blat drewniany pokryty tapicerką | 7a. Dodatkowa nakrętka (dotyczy stołów Aura i Eden) |
| 2. Nogi zewnętrzne | 8. Podłokietniki (dotyczy stołów Aura, Eden, Verona, Athena) |
| 3. Rozpórki nóg zewnętrznych | 9. Podgłówek |
| 4. Naciąg linkowy (system linek) | 10. Półka pod ramiona (opcja dodatkowa) |
| 5. Zamek walizkowy | 11. Podnoszony blat (dotyczy stołu Eden, Vesta i Athena) |
| 6. Uchwyty transportowe | 12. Zatyczka wycięcia na twarz |
| 7. Nakrętki | |

III. Obsługa

Kolejność rozkładania stołu:

1. Stół w stanie złożonym stanowi walizkę.
2. Otworzyć zamek (5).
3. Odchylić blaty stołu (1).
4. Wyciągnąć wyposażenie (8, 9, 10) z wnętrza stołu.
5. Rozłożyć nogi (2) maksymalnie na zewnątrz.
6. Ustawić stół na twardym i równym podłożu
(Przed obciążeniem środek blatu stołu powinien być odchylony około 3 cm do góry).
7. Sprawdzić naciąg systemu linek (4).
8. Ustawić odpowiednią wysokość stołu według tabeli „Regulacja wysokości”.
9. Zamontować podgłówek (9) i pozostałe wyposażenie (8, 10).
10. Unoszenie części ruchomej stołu odbywa się poprzez:
 - a) odblokowanie części ruchomej,
 - b) uniesienie na żądaną wysokość.*
11. Opuszczenie części ruchomej stołu odbywa się poprzez jej maksymalne uniesienie, a następnie opuszczenie na dół i zablokowanie.*

*dotyczy stołów Eden, Vesta i Athena

Tab. Regulacja wysokości.

1	2	3	Stoły	Opis czynności
			eSpirit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odkręcić nakrętkę. 2. Zdjąć nogę ruchomą ze śrub mocujących, przełożyć nogę ruchomą w wybrane położenie. 3. Zakręcić nakrętkę.
			Aura Eden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odkręcić nakrętki. 2. Zdjąć nogę ruchomą ze śrub mocujących, przełożyć nogę ruchomą w wybrane położenie. 3. Zakręcić nakrętki.
			Verona Athena Altus Vesta Luna Light	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wcisnąć bolec blokujący. 2. Przełożyć nogę ruchomą w wybrane położenie. 3. Wycisnąć bolec.
			Torina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odkręcić nakrętkę. 2. Przełożyć nogę ruchomą w wybrane miejsce. 3. Wcisnąć bolec.

IV. Ułożenie pacjenta

Pacjent siedzi z boku stołu na blacie tapicerowanym i przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje masażysta, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole, a po skończonym zabiegu pomaga bezpiecznie zejść ze stołu.

Uwaga! Przed położeniem pacjenta należy sprawdzić: prawidłowość rozstawienia nóg zewnętrznych, stan techniczny linek i ich naciąg.

V. Złożenie stołu

1. Wymontować podgłówek (9) i pozostałe wyposażenie dodatkowe (8, 10).
2. Przenieść stół z pozycji pracy do pozycji składania (pozycja boczna na gumowych stopkach).
3. Złożyć nogi zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe położenie linek i ich części mocujących.
4. Umieścić wyposażenie wewnątrz stołu.
5. Zamknąć walizkę zamkiem (5).
6. Umieścić walizkę w pokrowcu.

VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące: Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.